

Corning News August 2010

CORNING

August, 2010
Corning Life Sciences

News Index:

製品変更

・マイクロセントリフュージ製品
変更 - page 1

・セルスクレーパー内箱変更 -
page 1

・100mm ディッシュパッケージ改
良 - page 1

・ハイパーフラスコ交換キャップ
添付 - page 2

新製品

・ベントキャップ/サイドアームア
ッセンブリ付きディスポーザ
ブルスピナーフラスコ - page
2

・三角フラスコ用交換キャップ -
page 3

・ハイパーフラスコ用交換キャッ
プ別売り - page 2

お詫びと訂正

・ディスポーザブルガラス寸法
訂正 - page 3

・製造中止のお知らせ -
page 3

マイクロセントリフュージチューブ製品変更

コーニングのスクリーキャップマイクロセントリフュージ(カタログ番号430909, 430915, 430917)のデザイン・仕様を変更しました。従来品より透明なバージンポリプロピレンで製造されているので中身の確認が容易です。その他の変更点は下表の通りです。製品の寸法にも多少変更がありますが、チューブの容量に変更はありません。



カタログ番号430909の変更前
(左) 変更後(右)

	変更前	変更後
最大RCF	13,000	20,000
滅菌保証レベル	SAL10 ⁻⁵	SAL10 ⁻⁶
寸法公差	±0.05インチ	±0.01インチ
マーキングスポット	あり	なし
O-リングの色	白	黒

取り出し便利なディスペンサーBOXに

コーニングのセルスクレーパーの内箱が変わりました。白い内箱の側面をティッシュペーパーの箱を開ける要領で点線に沿って押し開けていた



だと、そこから一本ずつ簡単に取り出せる便利なディスペンサーボックスになりました。無菌性保証レベルもSAL10⁻³からSAL10⁻⁶とグレードアップしてさらに確実に became.

カタログ番号	仕様	ブレードの長さ(cm)	ハンドルの長さ(cm)	包装	入り数	希望小売価格(円)
3010	セルスクレーパー(小)	1.8	25	個別包装	100本	26,300
3011	セルスクレーパー(大)	3.0	39	個別包装	100本	37,800



“キズ付きにくく”パッケージ改良 100mmディッシュ

コーニングの100mmの細胞培養用ディッシュのバック素材と包装を変更しました。この変更によって輸送中に生じがちなディッシュとバックの擦れによる傷を軽減しました。バックに接するディッシュも無駄なく使えます。*TCT:細胞培養表面処理

カタログ番号	表面処理	直径(mm)	包装	入り数	希望小売価格(円)
430167	TCT*	100	20枚/包	500枚	76,500
430293	TCT*	100	10枚/包	480枚	80,640
430591	無処理	100	20枚/包	500枚	39,000


Corning News August 2010

CORNING



NEW ベントキャップ装着済み 500mL、1L、3L

お客様のご要望により、別売りで販売中のカタログ番号 3567 ベントキャップ(左写真)が初めから装着されているディスプレイスナーフラスコが発売になりました。このベントキャップは孔径 $0.2\mu\text{m}$ のポリエステル製メンブレン付きでこれによって無菌的なガス交換を可能にします。右写真はソリッドキャップが装着されている 1L と 3L。

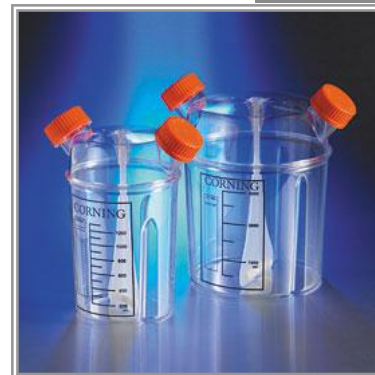

無菌的な培地の出し入れに便利です

NEW サイドアームアッセンブリ装着済み 3L

片方のネックに初めからサイドアームアッセンブリが装着されているスピナーフラスコの種類が増えました。1Lに加えて3Lも登場しました(左写真は1Lと3L)。サイドアームアッセンブリ(写真左下)は容器の外側に伸びる 1/8 インチチューブに培地の容器などを接続して使用し、コンタミネーションリスクの少ない液体の出し入れを可能にします。スムーズな液体の出し入れに欠かせないガス交換のためのコマ型の $0.2\mu\text{m}$ ベントフィルターも完備。1/8 インチチューブの先端には接続に便利なオススルーロック(右写真)が付いています。袋から取り出してすぐにお使いいただけます。



ディスプレイスナーフラスコは低速スターラーを使用して浮遊系細胞やマイクロキャリアビーズを用いる接着系細胞の培養に従来のガラス製スピナーフラス

カタログ番号	製品	入り数	希望小売価格(円)
3578	500mL スピナーフラスコ、ベントキャップ付き	12 個	122,880
3580	1L スピナーフラスコ、ベントキャップ付き	6 個	98,640
3581	3L スピナーフラスコ、ベントキャップ付き	4 個	82,000
3579	3Lスピナーフラスコ サイドアームアッセンブリ付き	4 個	142,000

と同様にご使用いただけます。(材質:キャップ:HDPE、本体:PS、パドル:PS(500mL)、PP(1L、3L)、 γ -線滅菌済み(SAL10⁶)、二重個別包装)

ハイパーフラスコMに交換用キャップ添付 別売りも NEW



実験操作中にキャップを落としてしまった(!)という場合に備えて、1ケースに1個交換用キャップが添付されています。ハイパーのキャップは専用の漏れを防ぐライナー付き。長期間の培養等で途中で培地交換をする場合には別売りの専用キャップ(4個入り)をお買い求めください。

カタログ番号	仕様	包装	入り数	希望小売価格(円)
10035	ハイパーフラスコ用 33mm フラットキャップ	個別包装	4 個	2,180

Corning News August 2010

CORNING



本体をくり返し使用する際に

三角フラスコ用交換キャップ **NEW**

500mLと1Lのポリカーボネート製三角フラスコに適合する43mmキャップが発売になりました。PP製で孔径0.2μmのPTFE製メンブレン付。γ線滅菌済み。

※ベントキャップのオートクレーブ滅菌はお勧めしません。

カタログ番号	仕様	包装	入り数	希望小売価格(円)
431372	三角フラスコ 500mL/1L用交換ベントキャップ	個別包装	50個	23,000

製造中止品のご案内

以下の製品が在庫限りで販売中止となります。

製造中止品 カタログ番号	製品	代替品 カタログ番号	製品
3751	サーモウェルゴールド PCRプレート96ウェル フルスカート 黒	3752	サーモウェルゴールド PCRプレート96ウェル フルスカート 透明
3755	サーモウェルゴールド PCRプレート96ウェル ハーフスカート 黒	3753	サーモウェルゴールド PCRプレート96ウェル ハーフスカート 透明
3068	CellBIND®ロボフラスコ 10個/包 50個/ケース	3067	CellBIND®ロボフラスコ 20個/包 100個/ケース

ディスプレイガラスピペット寸法の訂正

昨年12月の Corning New でお伝えした PYREX®ディスプレイガラスピペットの寸法変更に関する誤りがありました。カタログ番号 7077B-10 及び 7078B-10 寸法・デザイン変更後の全長について「186mm」と記載しましたが正しくは「224mm」でした。お詫びして訂正いたします。